


INYECTOR DE ENDOTELIO PARA TÉCNICA DSEK

REFERENCIA: KM-DSEK

MARCA: KERAMED INC.

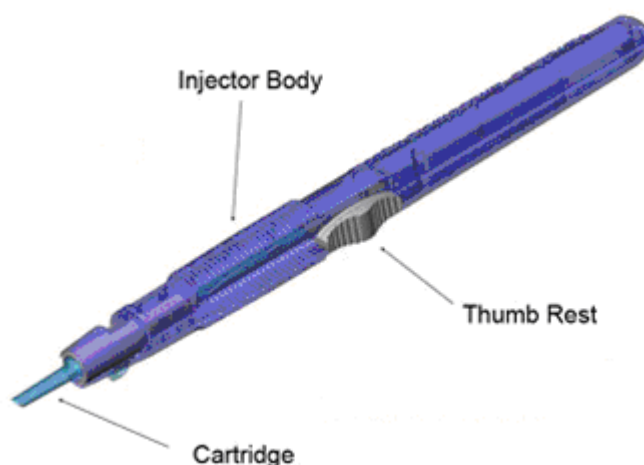

Descripción: endoinyector diseñado para conseguir una inyección segura de la lamela corneal (estromal-endotelial) de 8 a 9 mm mediante la queratoplastia endotelial con pelado de la membrana de Descemet (DSEK) a través de una incisión corneal de 3,2 mm o superior.

Gracias a su diseño se evita la compresión de la lamela por la incisión evitando su rotación, ya que se inyecta directamente en la cámara anterior a través de la incisión corneal. Una vez dentro del ojo, la lamela se abre y despliega automáticamente.

El grosor de la lamela debe estar comprendido entre 100 y 200 micras.

El inyector está diseñado para utilizarse con una sola mano, tanto para trabajar con la mano derecha como con la izquierda.

Se presenta en una caja con dos cartuchos, uno de recambio. Si no se utiliza el segundo cartucho, se debe eliminar junto con el inyector y el cartucho empleado.

Estéril y de un solo uso.

Presentación: Caja con un inyector y dos cartuchos.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0459 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.