

MEJORA LA POSICIÓN DE LOS PACIENTES Y SU RECUPERACIÓN

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. El personal médico puede sentar al paciente en nuestra cama con sólo presionar la palanca, que acciona el pistón del gas.



Altura mínima: 37 cm.

Altura máxima: 76,5 cm.

Cama GALAXY REHA

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

EQUIPAMIENTO BÁSICO

- 1. Cama totalmente eléctrica con sistema de compases.
- 2. Carga máxima permitida: 230 Kg
- 3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS.
- 4. Mando de control de paciente.
- 5. Panel de control de enfermería.
- 6. Autocontour (11 cm respaldo / 7 cm pelvis).
- 7. Batería de emergencia..
- 8. Ruedas de diámetro de 75mm escamoteables..
- 9. Cuatro soportes para barra porta sueros e incorporador.
- 10. Soporte enrolla-cable.
- 11. Topes de colchón.
- 12. Sistema central de frenado.
- 13. Porta-accesorios bilateral.
- 14. 8 enganches para correas de inmovilización.

ACCESORIOS

- 1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
- 2. Incorporador (REF. CHA17).
- 3. Palo de gotero (REF CHA15).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- 1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).
- 2. Barandillas laterales en haya vaporizada (REF. CHV53).
- 3. Pedal bilateral de altura variable con función de bloqueo (REF. CHV83).
- 4. Batería de larga duración recargable.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Alimentación eléctrica	230V 50Hz
Consumo máximo	1.6A, 370 Volt.
Indicador de protección	IP 66
Clase de protección	Clase I
Grado de protección frente a descarga	Tipo B

DATOS TÉCNICOS

Dimensión externa	215 x 96 cm.
Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm.
Elevación de altura	37 - 76,5 cm.
Inclinación de plano de tronco	70°
Inclinación de plano de piernas	45°
Autoregresión de plano de tronco	11 cm.
Autoregresión de plano de piernas	7 cm.
Trendelemburg / antitrendelemburg	+- 16°
Peso de la cama sin accesorios	150 kg.
Carga máxima de la cama	230 kg.

ERGONOMÍA DE LA POSICIÓN: DOBLE AUTO-REGRESIÓN

La doble regresión de la cama GALAXY REHA permite ajustar los movimientos de la sección del respaldo (11 cm) y la pélvica (7 cm) reduciendo al mínimo la fricción.

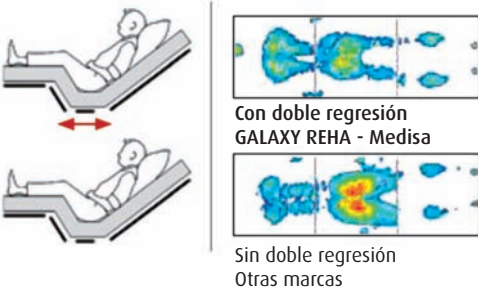

POSICIONAMIENTO Y CONFORT



Panel de control de enfermería
Consola para uso exclusivo del personal médico; permite activar y cancelar las distintas funciones de la cama.



Mando de control
El mando incluye dos funciones para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de puesta a cero.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



Secciones en ABS fácilmente extraíbles



BUREAU VERITAS



ECO-LABEL
ISO 14001



IBV



CE

www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

Mobiliario Clínico
Cama GALAXY REHA



Cama GALAXY REHA

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

La cama GALAXY REHA ha sido creada para buscar un entorno más agradable, dentro del ámbito asistencial.



- Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- Contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.
- Innovador concepto de barandillas laterales que cubren el 100% del lecho según norma EN 60601-2-52
- Con los nuevos sistemas de la cama GALAXY REHA adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.

REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

BARANDILLAS



- 1 Barandillas abatibles metálicas.
- 2 Barandillas de 2 barras con tope. Para cuidados intensivos y medios (recomendado para niveles 1-3).

Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilitan el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento, realizado en haya vaporizada.



Movimiento trendelemburg - antitrendelemburg +-16°

Barandillas laterales TOTAL PROTECT: ofrecen una protección perfecta frente a las caídas. Según normativa EN 60 601-2-52. Realizadas en haya vaporizada.

4 secciones en ABS fácilmente extraíbles.

Sistema de freno centralizado mediante ruedas de goma retráctil.