


MEJORA LA POSICIÓN DE LOS PACIENTES Y SU RECUPERACIÓN

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. El personal médico puede sentar al paciente en nuestra cama con sólo presionar la palanca, que acciona el pistón del gas.



ERGONOMÍA DE LA POSICIÓN: DOBLE AUTO-REGRESIÓN

La doble regresión de la cama **NEW MILLENIUM** permite ajustar los movimientos de la sección del respaldo (11 cm) y la pélvica (7 cm) reduciendo al mínimo la fricción.

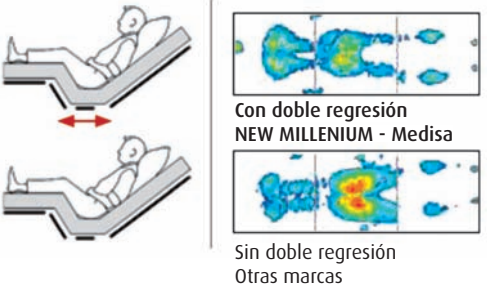

POSICIONAMIENTO Y CONFORT

Mando de control de paciente
El mando incluye la posibilidad de bloquear cada una de las funciones de la cama.




FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



FACILIDAD DE MOVIMIENTO

La quinta rueda facilita el giro de la cama y reduce el esfuerzo necesario para desplazarla (opcional).

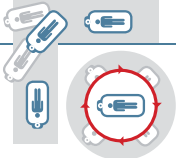

Cama NEW MILLENIUM

Calidad y resistencia al mejor precio

EQUIPAMIENTO BÁSICO	EQUIPAMIENTO OPCIONAL
1. Cama eléctrica con sistema de elavación mediante compases. 2. Carga máxima permitida: 230 Kg. 3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS. 4. Mando de control de paciente. 5. Autocontour (11 cm respaldo / 7 cm pelvis). 6. Batería de larga duración recargable. 7. Ruedas de 150 mm de diámetro. 8. Paragolpes de protección. 9. Carenado inferior en ABS. 10. Cuatro soportes para barra porta sueros e incorporador. 11. Soporte enrolla-cable. 12. Topes de colchón. 13. Sistema central de frenado. 14. Rueda direccional. 15. Indicador de ángulo del respaldo y TR/ATR. 16. Porta-accesorios bilateral. 17. 8 enganches para correas de inmovilización.	1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50). 2. Barandillas laterales partidas en ABS (REF. CHV53). 3. Pedal bilateral de altura variable con función de bloqueo (REF. CHV83). 4. Quinta rueda (REF. CHV 24). 5. Soporte rayos X (REF. CHV26). 6. Extensión de lecho integrada (+15cm).
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Alimentación eléctrica	230V 50Hz
Consumo máximo	1.6A, 370 Volt.
Indicador de protección	IP 66
Clase de protección	Clase I
Grado de protección frente a descarga	Tipo B
DATOS TÉCNICOS	
Dimensión externa	215 x 96 cm.
Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm.
Elevación de altura	45 - 76,5 cm.
Inclinación de plano de tronco	70°
Inclinación de plano de piernas	45°
Autoregresión de plano de tronco	11 cm.
Autoregresión de plano de piernas	7 cm.
Trendelemburg / antitrendelemburg	+/- 16°
Peso de la cama sin accesorios	150 kg.
Carga máxima de la cama	230 kg.
Extensión del lecho	+/- 15 cm.

ACCESORIOS

- 1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
- 2. Incorporador (REF. CHA17).
- 3. Palo de gotero (REF CHA15).



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



Mobiliario Clínico
Cama NEW MILLENIUM

Cama NEW MILLENIUM

Calidad y resistencia al mejor precio

La cama NEW MILLENIUM ha sido desarrollada para alcanzar las más altas exigencias que existen dentro del ámbito hospitalario universal.



- Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- Contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.
- Innovador concepto de barandillas laterales que cubren el 100% del lecho según norma EN 60601-2-52
- Con los nuevos sistemas de la cama NEW MILLENIUM adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.

REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Las cuatro barandillas partidas permiten tener un acceso individual sobre el paciente.

BARANDILLAS



- 1 Barandillas abatibles metálicas.
- 2 Barandillas laterales partidas sin controles incorporados

Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilitan el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento.

Barandillas laterales TOTAL PROTECT: ofrecen una protección perfecta frente a las caídas. Según normativa EN 60 601-2-52.

4 parachoques situados en las esquinas.

Extension del lecho integrada (opcional)

Tr/A-Tr. accionado mediante resorte a gas.

Sistema de freno centralizado y servo direccionado.



◦ Sistema de abatimiento de las barandillas de fácil manejo con sistema de indicador de ángulo integrado.



◦ Extensión de lecho integrada hasta 15 cm.