


POSICIÓN SILLA CARDIACA

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardio-respiratorios, ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. El personal médico puede sentar al paciente en nuestras nuevas camas con sólo presionar un botón, puesto que la cama **VOLTEA** incorpora un sistema de posicionamiento automático.

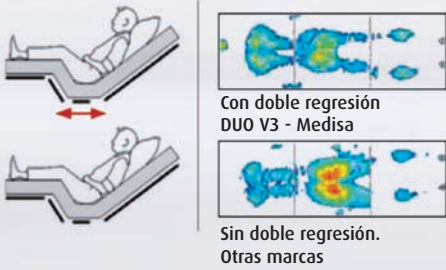

POSICIÓN DE FOWLER

Es una posición automática para reconocimiento médico.



POSICIÓN DE LATERALIZACIÓN

Una posición adecuada para prevenir posibles complicaciones (úlceras por presión, deformidades, trastornos circulatorios, etc). También para hacer transfer de la cama a la mesa de quirófano o camilla de traslado, aseo del paciente, hacer la cama con el paciente, etc.

POSICIONAMIENTO Y CONFORT



Panel de control de enfermería

Consola para uso exclusivo del personal médico; permite activar y cancelar las distintas funciones de la cama. Además incorpora determinadas funciones preprogramadas (Trendelemburg, CPR, silla cardíaca y posición de reconocimiento Fowler), con solo pulsar una tecla.



Mando de control

El mando incluye dos funciones para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de puesta a cero.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



Sistema de freno centralizado


ALARMA DEL PEDAL DE FRENO

Cuando la cama está conectada al suministro eléctrico, esta alarma avisa al personal asistencial de si el sistema de freno está activado.



FACILIDAD DE MOVIMIENTO

La quinta rueda facilita el giro de la cama y reduce el esfuerzo necesario para desplazarla.

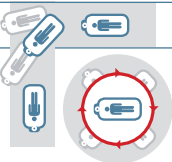

Cama VOLTEA

Pensada para mejorar la movilidad del paciente

EQUIPAMIENTO BÁSICO

1. Cama totalmente eléctrica con sistema de columnas.
2. Carga máxima permitida: 230 Kg.
3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS.
4. Mando de control de paciente.
5. Panel de control de enfermería.
6. Botón de seguridad GO.
7. Autocontour (11 cm respaldo / 7 cm pelvis).
8. Batería de larga duración recargable.
9. Ruedas de 150 mm de diámetro carenadas.
10. Paragolpes de protección.
11. Carenado inferior en ABS.
12. Cuatro soportes para barra portasueros e incorporador.
13. Soporte enrolla-cable.
14. Topes de colchón.
15. Sistema central de frenado.
16. Rueda direccional.
17. Indicador de ángulo del respaldo y TR/ATR.
18. Porta-accesorios bilateral.
19. 8 enganches para correas de inmovilización.

ACESORIOS

1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
2. Incorporador (REF. CHA17).
3. Palo de gotero (REF CHA15).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

1. Extensión de lecho integrada (+15cm).
2. Cabecero fijo a la base (REF. CHV65).
3. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).
4. Barandillas laterales partidas en ABS (REF. CHV53).
5. Barandillas laterales partidas con controles (REF CHV84).
6. Pedal bilateral de altura variable con función de bloqueo (REF. CHV83).
7. Quinta rueda (REF. CHV 24).
8. Alarma de freno activado / desactivado (REF. CHA30).
9. Luz de posición (REF. CHA28).
10. Soporte rayos X (REF. CHV26).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	230/110V 50/60Hz
Consumo máximo	1.6A, 370 Volt
Indicador de protección	IP 66
Clase de protección	Clase I
Grado de protección frente a descarga	Tipo B

DATOS TÉCNICOS

Dimensión externa	213 x 96 cm
Dimensión superficie de paciente	208 x 87 cm
Elevación de altura	44,4 - 84,4 cm
Inclinación de plano de tronco	69°
Inclinación de plano de piernas	32°
Autoregresión de plano de tronco	11 cm
Autoregresión de plano de piernas	7 cm
Trendelemburg	+ - 12°
Anti-trendelemburg	+ - 16°
Lateralización	+ - 23°
Peso de la cama sin accesorios	150 kg.
Carga máxima de la cama	230 kg.
Extensión del lecho	+ - 15 cm.



BUREAU VERITAS



ECO-LABEL
ISO 14001



IBV



CE

www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

Mobiliario Clínico
Cama VOLTEA



NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

Cama VOLTEA

Pensada para mejorar la movilidad del paciente



La cama VOLTEA permite al paciente y al personal sanitario ajustar el respaldo de la cama en la posición más adecuada para favorecer una fácil incorporación. Asimismo, la barandilla partida permite que el paciente tenga una salida guiada de la cama.



◦ Sistema de abatimiento de las barandillas de fácil manejo con sistema de indicador de ángulo integrado.



◦ Extensión de lecho integrado: sistema mecánico de lecho integrado hasta 20 cm.

REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Las cuatro barandillas partidas permiten tener un acceso individual sobre el paciente.

BARANDILLAS



- 1 Barandillas abatibles metálicas.
- 2 Barandillas laterales partidas con controles incorporados.
- 3 Barandillas laterales partidas sin controles incorporados.



Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilita el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento.

Respaldo radiográfico con porta chasis (opcional).

Arquillos laterales que evitan desplazamientos del colchón.

Somier compuesto de módulos independientes realizados en ABS, fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza.

Panel de control de enfermería situado en el piecero de la cama.

Barandillas laterales **TOTAL PROTECT**: ofrecen una protección perfecta frente a las caídas, con cobertura del 100% del lecho. Según normativa EN-60 601-2-52.

Barra porta-accesorios universal con 4 soportes.

Sistema de quinta rueda.

Pedal para regulación de altura equipado con protección automática.

Topes de protección situados en cada esquina con el fin de proteger la cama durante el transporte.

Sistema de freno centralizado y servo direccionado de una rueda en cabecera. Ruedas de 150 mm ø.