

TERUMO
FINETOUCH® Bolígrafo Lanceta Tipo S



Referencia	Etiquetado	Empaquetado	CE LATEX PVC
MS*GN03D	DA, SV, NO, FI, ES, PT	1 / 10 / 100	

TERUMO
FINETOUCH® Lanceta



Referencia	Etiquetado	Empaquetado	CE 0197 LATEX PVC
MS*GN4530D	DA, SV, NO, FI, ES, PT	30 / 300 / 3000	

Every day,
as healthcare
professionals,
you are working
to ensure life and
to contribute
to the well-being
of your patients.
Every day,
Terumo Europe
provides you
with the clinical
systems, means
and solutions
to keep life flowing.



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatahaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN
Tel. +81/3 3374.8111
Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

**TERUMO EUROPE N.V.
BENELUX SALES DIVISION**
Researchpark Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.39.25.80
Fax +32/16.39.25.99
THE NETHERLANDS
Tel. 0800/022.03.96
Fax 0800/022.04.14

**LABORATOIRES TERUMO
FRANCE S.A.**
1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1 30.96.13.00
Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49/61.96.80.230
Fax +49/61.96.80.23.00

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Zweigniederlassung Wetzlar
Bahnhofstrasse 88
CH-5430 Wetzlar
SWITZERLAND
Tel. +41/56.419.10.10
Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPA A SL
Avda. Juan Carlos I, N 13 - 7 Planta
Edificio Torre La Garena
28906 Alcalá de Henares (Madrid)
SPAIN
Tel. general: +34/902.10.12.98
cust. serv.: +34/902.20.31.40
Fax general: +34/902.10.13.58
cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL
Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALY
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB
Nya Varvet Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK
Filial af TERUMO SWEDEN AB
Tel. +45/7020.93.80
Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.
Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44/1784.476.200
Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.
Moscow Representative office
4, Ivana Franko St
121108 Moscow
RUSSIA
Tel. +7/495.234.3303
Fax. +7/495.234.3303

©: Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.

www.terumo.com
www.terumo-europe.com

Addresses are subject to change,
please consult our website.

DI 42ES-0908SCHO-1111(11.09)E

Diabetes Systems



TERUMO
FINETOUCH®
Bolígrafo Lanceta
Tipo S

para toma de muestra de sangre capilar


Menos Dolor
Más Seguridad
Fácil de Usar



TERUMO®
We keep life flowing


TERUMO®
We keep life flowing

Menos Dolor

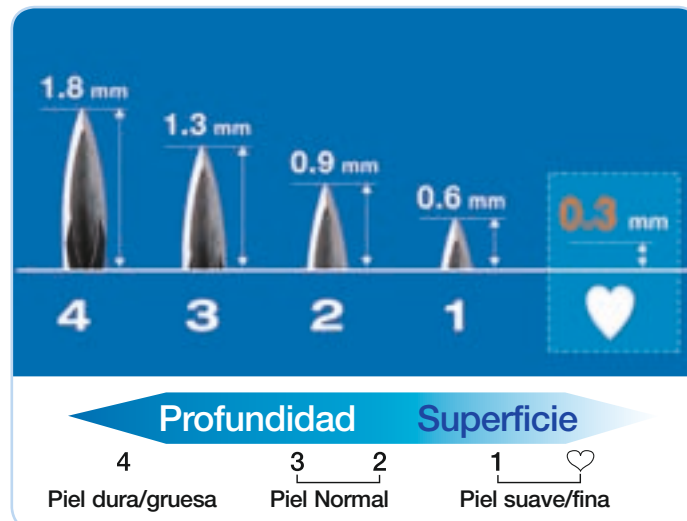

5 Niveles de penetración ajustables

- Adaptable al tipo de piel de cada paciente.
- Mínima profundidad de penetración: sólo 0.3 mm.
- Permite una toma de la muestra de sangre particularmente confortable.

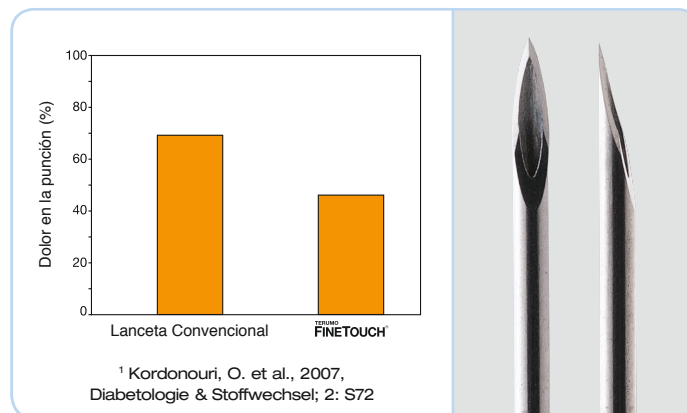

Diseño funcional

- Aguja hueca especialmente diseñada para una reducción notable del dolor.
- En una encuesta, el 54% de los pacientes han percibido que la lanceta Finetouch es indolora, comparada al 31% con una lanceta convencional.¹

Más Seguridad

Manipulación higiénica

- El cuerpo azul de la lanceta protege al bolígrafo del contacto con la piel y contaminación con la sangre, previniendo así el contagio por contaminación cruzada.

Seguridad para el usuario

- La aguja de la lanceta está protegida por un soporte de plástico antes y después de la penetración, previniendo de posibles pinchazos.
- El uso múltiple de la lanceta no es posible. El mecanismo del disparador sólo se libera cuando se utiliza una lanceta nueva.

La delgadez de la punta de la lanceta hace particularmente sencillo pinchar en el punto de punción deseado.




Fácil de Usar

La lanceta se inserta en el bolígrafo con un movimiento simple. Cuando se escucha un CLICK, el bolígrafo está listo para usar.



1. Ajuste la profundidad de penetración:

Gire la rueda para elegir la profundidad de penetración deseada.

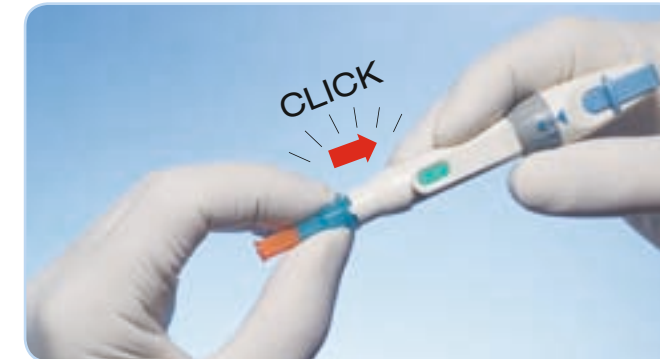

2. Inserte la lanceta:

Inserte la lanceta firmemente hasta el tope (se escuchará un CLICK). Retire el capuchón de protección naranja.



3. Toma de muestra de sangre:

Coloque la lanceta suavemente sobre la piel y presione el botón para activarla (PUSH).



4. Eliminación:

Retire la lanceta y deposítela en un contenedor de residuos cortantes.

Este documento es un resumen y no pretende ser exhaustivo. Para más detalles o en caso de tener más preguntas, acuda a las Instrucciones de Uso incluidas en el producto o contáctenos en nuestra oficina local de TERUMO.