



SurGuard 2™

**Prevención de
pinchazos con un
simple click.**



- Mecanismo de seguridad fácil de usar
- Activación sencilla con una sola mano
- Click audible al activar el protector
- Confirmación visual de aguja completamente cubierta
- Gama de productos extensa

 **TERUMO®**

We keep life flowing

La solución de seguridad más sencilla de Terumo.



SEGURIDAD

Terumo ha desarrollado un mecanismo de bloqueo muy sencillo que reduce el riesgo de lesiones debidas a pinchazos de aguja.

Un click audible indica que se ha activado el mecanismo de seguridad, que puede comprobarse a continuación visualmente.



ACTIVACIÓN

El mecanismo de protección de las agujas de seguridad de Terumo se activa con una sola mano.




COMODIDAD

El cono estándar se adapta a todas las jeringuillas con conexión tipo luer lock o luer slip.

El lugar de punción siempre está visible porque el protector se puede colocar de la forma más conveniente.

Antes de la activación

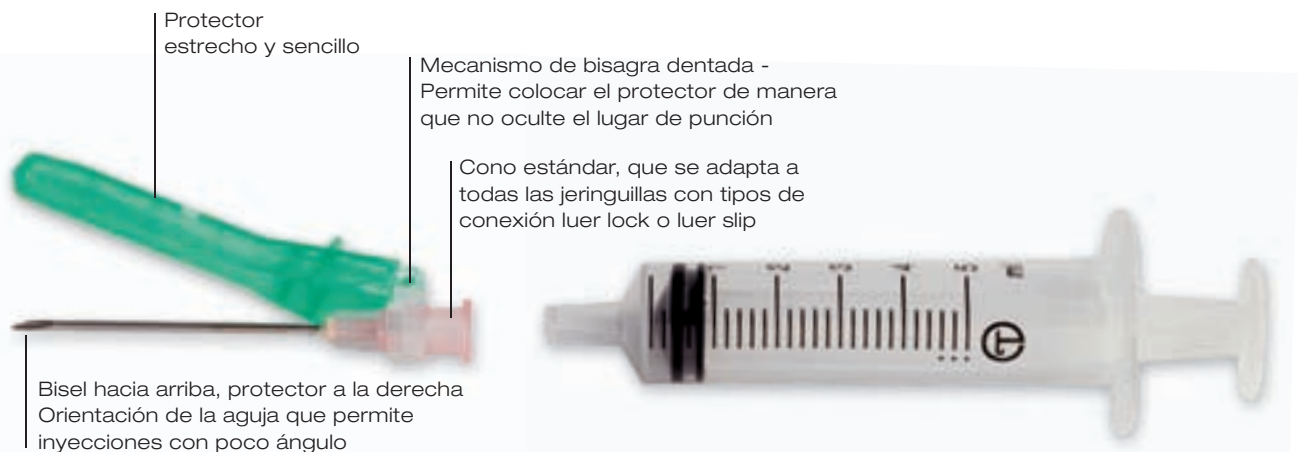

Después de la activación




La aguja queda completamente atrapada por el mecanismo de bloqueo



Instrucciones de Uso

1. Preparación del producto antes de la inyección Confirmación

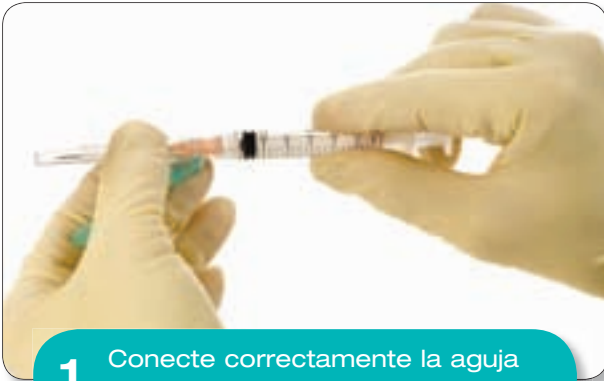

1 Conecte correctamente la aguja SurGuard2™ a la jeringuilla.



2 Levante el protector de la aguja.




3 Retire el capuchón de la aguja, con cuidado de extraerlo en línea recta. No lo tuerza.

2. Activación del protector tras la inyección



1 Sitúe el protector en un ángulo de 40°- 45°. Con un movimiento FIRME y rápido, presione hacia abajo sobre una superficie plana hasta que se oiga un click.

O bien

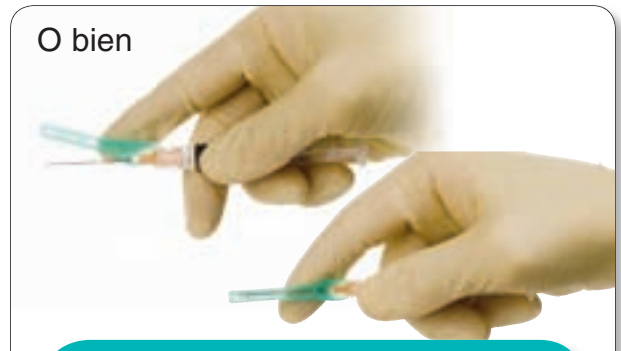

2 Con un movimiento FIRME y rápido, lleve el protector a su sitio con el dedo hasta que se oiga un click.



3 Compruebe visualmente que el protector cubre completamente la aguja.


Segura y fácil de utilizar

Las agujas SurGuard2™ vienen en paquetes individuales estériles tipo blister del color de referencia, con una indicación clara de su fecha de caducidad. El color de referencia de los conos translúcidos permite identificar fácilmente su calibre. El protector rígido y moldeado de la aguja garantiza la integridad de la misma hasta el momento de su uso.

Pared fina de Terumo para caudales superiores

Las agujas con pared fina-Terumo permiten utilizar calibres más pequeños y confortables con un caudal superior respecto de las agujas con pared Fina o Normal.

Además, los líquidos con alto grado de viscosidad se inyectan con más fluidez que con las agujas estándar.

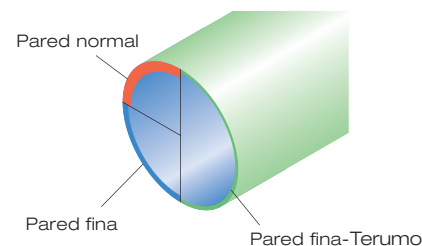

SurGuard2™

Tamaños disponibles				
Código	Color referencia	Tamaño (Gauge / Pulgada)	Tamaño (mm)	Espesor pared
SG2+1825	Rosa	18G x 1"	1.20 x 25 mm	Pared fina
SG2+1838	Rosa	18G x 1 1/2"	1.20 x 38 mm	Pared fina
SG2+1925	Beis	19G x 1"	1.10 x 25 mm	Pared fina
SG2+1938	Beis	19G x 1 1/2"	1.10 x 38 mm	Pared fina
SG2+2025	Amarillo	20G x 1"	0.90 x 25 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2038	Amarillo	20G x 1 1/2"	0.90 x 38 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2125	Verde	21G x 1"	0.80 x 25 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2138	Verde	21G x 1 1/2"	0.80 x 38 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2225	Negro	22G x 1"	0.70 x 25 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2238	Negro	22G x 1 1/2"	0.70 x 38 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2325	Azul	23G x 1"	0.65 x 25 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2338	Azul	23G x 1 1/2"	0.65 x 38 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2516	Naranja	25G x 5/8"	0.50 x 16 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2525	Naranja	25G x 1"	0.50 x 25 mm	Pared fina-Terumo
SG2+2538	Naranja	25G x 1 1/2"	0.50 x 38 mm	Pared normal
SG2+2613	Marrón oscuro	26G x 1/2"	0.45 x 13 mm	Pared normal
SG2+2713	Gris	27G x 1/2"	0.40 x 13 mm	Pared normal
SG2+3013	Amarillo	30G x 1/2"	0.30 x 13 mm	Pared normal

- Caja de unidades: 100 unidades
- Caja de envío: 800 unidades (8 x caja unidades)
- Esterilización por haz de electrones



Cada día los profesionales de la salud trabajan para asegurar al vida y contribuir al bienestar de los pacientes. Cada día, Terumo Europe proporciona con sistemas clínicos, medios y soluciones para que la vida fluya.



TERUMO®
We keep life flowing

TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN
Tel. +81/3 3374.8111
Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION
Researchpark Haasrode 1515
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.39.25.80
Fax +32/16.39.25.99
THE NETHERLANDS
Tel. 0800/022.03.96
Fax 0800/022.04.14

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.
1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1 30.96.13.00
Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49/61.96.80.230
Fax +49/61.96.80.23.200

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Zweigniederlassung Wettingen
Bahnhofstrasse 88
CH-5430 Wettingen
SWITZERLAND
Tel. +41/56.419.10.10
Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL

Avda. Juan Carlos I, N° 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
SPAIN
Tel. general: +34/902.10.12.98
cust. serv.: +34/902.20.31.40
Fax general: +34/902.10.13.58
cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL
Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALY
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
SE-426 71 Västra Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK
Filial af TERUMO SWEDEN AB
Tel. +45/7020.93.80
Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.
Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44/1784.476.200
Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.
Moscow Representative office
4, Ivana Franko St
121108 Moscow
RUSSIA
Tel. +7/495.234.3303
Fax. +7/495.234.3303

®: Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
www.terumo.com
www.terumo-europe.com

Las direcciones están sujetas a cambios por favor consultar la red.