




Termómetro Terumo®



Precisión y durabilidad para profesionales

- Alta precisión
- Dos tipos de medida
- Fácil de usar - activación automática
- Larga duración - 10.000 mediciones
- Económico y ecológico
- Resistente a los golpes
- Resistente al agua

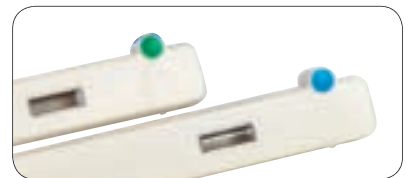

 **TERUMO®**

We keep life flowing

Alta precisión

Los termómetros Terumo® tienen dos métodos de medición de la temperatura central (de equilibrio) con una precisión de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.

Dos tipos de medidas

En el modo “**predictivo**” el microprocesador calcula la temperatura central del cuerpo basada en la temperatura detectada por el sensor de calor situado en el extremo. La ventaja es un tiempo de medida más reducido.

Cuando se utiliza el modo “**tiempo real**” el sensor mide hasta que no detecta ningún aumento de temperatura. La temperatura no se calcula en un algoritmo, sino que se mide realmente.



Fácil de usar - activación automática

El termómetro Terumo® se enciende automáticamente cuando se saca de su caja y se apaga cuando se vuelve a colocar dentro. Cuando se termina de medir se escucha un beep. Cambia automáticamente al modo de “tiempo real” y el modo activo aparece claramente indicado en la pantalla LCD.

Larga duración - económico y ecológico

El termómetro Terumo® permite un mínimo de 10.000 mediciones. Esto reduce costes al hospital y protege en medioambiente pues se necesitan menos unidades.

Duradero y resistente a los golpes

Los termómetros Terumo® son resistentes a caídas y al agua (IPX7). Una protección adicional es su caja de plástico duro.

Termómetro Terumo®

Codigo de producto	Codigo del color	Descripcion	Unidades por caja	Carton de envio
ET*C202S	Verde	Axila Unidad por caja	1	100
ET*C402S	Azul	Oral/rectal Unidad por caja	1	100
ET*C202H	Verde	Axilar 10 unidades por caja	10	100
ET*C402H	Azul	Oral/rectal 10 unidades por caja	10	100
ET*Covers	—	Funda (Blanda)	1.000	10.000

Cada día los profesionales de la salud trabajan para asegurar al vida y contribuir al bienestar de los pacientes. Cada día, Terumo Europe proporciona sistemas clínicos, medios y soluciones para que la vida fluya.



TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN
Tel. +81/3 3374.8111
Fax +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.
Researchpark
Haasrode 1520
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.38.12.11
Fax +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION
Researchpark
Haasrode 1515
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIUM
Tel. +32/16.39.25.80
Fax +32/16.39.25.99
THE NETHERLANDS
Tel. 0800/022.03.96
Fax 0800/022.04.14

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.
1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANCE
Tel. +33/1 30.96.13.00
Fax +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49/61.96.80.230
Fax +49/61.96.80.23.200

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH
Zweigniederlassung
Wettingen
Bahnhofstrasse 88
CH-5430 Wettingen
SWITZERLAND
Tel. +41/56.419.10.10
Fax +41/56.419.10.11

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL
Avda. Juan Carlos I,
N° 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
SPAIN
Tel. general:
+34/902.10.12.98
Tel. cust. serv.:
+34/902.20.31.40
Fax general:
+34/902.10.13.58
Fax cust. serv.:
+34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL
Via Simone Martini
143/145
I-00142 Roma
ITALY
Tel. +39/06.519.61.420
Fax +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Kållfelts Gata 18
SE-426 71 Västra
Frölunda
SWEDEN
Tel. +46/31.748.58.80
Fax +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK Filial af TERUMO SWEDEN AB
Tel. +45/7020.93.80
Fax +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.
Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44/1784.476.200
Fax +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.
Moscow Representative
office
4, Ivana Franko St
121108 Moscow
RUSSIA
Tel. +7/495.234.3303
Fax. +7/495.234.3303

®: Registered Trademark
Published by Terumo
Europe N.V.

TERUMO®

We keep life flowing

Las direcciones están sujetas a cambios
por favor consultar la red.

www.terumo.com
www.terumo-europe.com